

携帯型拡大読書器

この商品は、日常生活用具の対象商品です。
詳しくは、お住まいの市町村役場の福祉窓口までお問合せください。

pebble HD-basic

ペブル HD ベーシック

小さくても、くっきり

NEW

倍率
5レベル

4.5 5.5 7.8 9.4 13.4

¥99,800

非課税 2年保証

¥119,800

非課税 4年保証

画面サイズ	4.3 インチ
カラーモード	カラー / 白黒 / 白黒反転など7色
その他機能	・画像の静止機能・ライトオン/オフ機能・明るさ調節機能
本体サイズ	[ハンドル閉] 7.9(W)×14(D)×3.2(H)cm [ハンドル伸] 7.9(W)×25.9(D)×2.5(H)cm
重 量	200g
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 4時間充電、2.5～3時間連続使用
電 源	AC アダプター 5V/2.1A
付属品	ACアダプター、専用ケース/レンズ拭き用クロス

TELE
SOFT

株式会社 日本テレソフト

*当社は輸入・販売元です。

福祉機器事業部 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8-1 半蔵門MKビル1F
TEL. 03-3264-0800 FAX. 03-3264-0880
Eメール ts-info@telesoft.co.jp

<http://www.nippontelesoft.com>


*このカタログの内容は2015年4月現在のものです。20150450000



ルーペのように使うことができる
高画質拡大読書器です。

余分な機能をなくし
使いやすくしました。

小型・軽量で持ちやすく
外出先での使用に便利です。

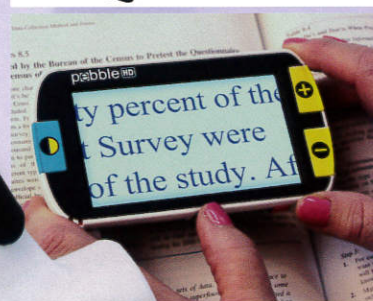

携帯型拡大読書器

amigo HD

アミーゴ HD

¥198,000

非課税 2年保証

大きく、はっきり

7インチの大きなワイド画面に
鮮やかではっきりとした画像を映し出します。
読みたい物の上に直接置いたり
手に持って遠くのものを見ることができます。

NEW



遠近両用
オート
フォーカス

無段階
倍率

14

~

25
倍

画面サイズ	7インチワイド
表示モード	カラー / 白黒 / 白黒反転など 32色
倍率	1.4倍 ~ 25倍
その他機能	・明るさ調節機能・ライトオン/オフ機能・画像の静止/保存機能 ・日時表示機能・HDMI対応モニター/テレビへの映像出力
本体サイズ/重量	20(W)×14(D)×2.6(H)cm / 590g
バッテリー	使用時間 / 3 ~ 5時間(明るさなどの設定による) 充電時間 / 4時間 リチウムイオンバッテリー
電源	ACアダプター 9V/2.66A
video出力	ミニHDMI
付属品	ACアダプター、ミニUSBケーブル、ミニHDMIケーブル レンズ拭きクロス、キャリングケース

この商品は、日常生活用具の対象商品です。
詳しくは、お住まいの市町村役場の福祉窓口までお問合せください。



遠近両用のオート
フォーカスカメラで、離れた場所
のメニューや標識も映し出します。



雑誌、新聞、本、写真などを
見るができます。



35度、90度の2段階に角度
調整可能なスタンドで、読む・



書く等はもちろん、
爪のお手入れや細
かな作業をする時
にも役立ちます。



軽くてポータブルなデザイン。室内でも
外出先でも便利にご使用いただけます。

■販売代理店

TELE
SOFT

株式会社 日本テレソフト

*当社は輸入・販売元です。

福祉機器事業部 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8-1半蔵門MKビル1F
TEL. 03-3264-0800 FAX. 03-3264-0880
Eメール ts-info@telesoft.co.jp

<http://www.nippontelesoft.com>

*このカタログの内容は2015年4月現在のものです。20150450000

メ ガ ネ ロービジョン **アサクラ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

携帯型拡大読書器

pebble-mini

ペブル ミニ

¥34,800

非課税 2年保証

超軽量

108g

倍率
4レベル

3.1

4.1

5.9

10倍



*原寸大

省電力モードは3分間未使用で自動的にスリープモードに切り替わります。

Micro SD card内蔵 (2GB)。

携帯に便利な長いストラップ付き。

画面サイズ	3.0インチTFTモニター
サイズ	11.3(L)×6.4(W)×1.9(H)cm
重さ	108g
倍率	3.1倍、4.1倍、5.9倍、10倍、4レベル
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.5時間充電、2時間連続使用
カラーモード	カラー・白黒・白黒強調・白黒反転 その他28色から3種類選択
電源	ACアダプター (ミニUSBタイプ) 100-240VAC 50/60Hz

TELE
SOFT

株式会社 日本テレソフト

取扱代理店

〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-8-1 半蔵門MKビル 1F
TEL. 03-3264-0800 FAX. 03-3264-0880
E-mail: ts-info@telesoft.co.jp

<http://www.nippontelesoft.com>

メガネ
ロービジョン **アサカ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

SAPPHIRE[™]

Portable Video Magnifier

サファイア

携帯拡大読書器



サファイアの特徴

- 大きく、明るく、コントラストがはっきりした画面（7 インチ）
- 3.4 倍から 16 倍までの幅広い拡大率
- 薄くて軽い本体（厚さ：4.6 cm、重さ：約 879g）
- フルカラー、白黒、白黒反転など、23 種類の文字と背景の色設定が可能
- 読みたい部分を強調するマスキング機能とマーカー機能
- 読みたいものの上に平らに置いて使用可能
- 静止画撮影機能
- 記入用スタンド
- 充電式バッテリーで 4 時間連続使用が可能
- キャリーケース付き

いつでも使える多機能な拡大読書器

サファイアを使えばいつでもどこでも必要なときに必要なものを拡大して読むことができます。レストランのメニュー、お店のレシート、地図の細かい部分、バスのルート、時刻表、薬のラベルなど、さまざまなものを拡大して読むことができるコンパクトな拡大読書器です。

鮮明な拡大

7 インチの明るい画面に見やすく表示します。拡大率は 3.4 倍から 16 倍まで、スライドバーを使って簡単に変更できます。オートフォーカス機能により、拡大率を変更してもピントを合わせ直す必要はありません。新聞のように大きな文字と小さな文字が隣り合わせにある文書を読むのも、とても便利です。サファイアは読みたいものの上に平らに置けるので、拡大鏡のように手が疲れたり、画面がぶれてしまうこともありません。文字と背景の色は、フルカラー、白黒、白黒反転など、合計 23 種類の色設定から見やすいものを選択して使用することができます。

本体 2 年保証
バッテリー 1 年保証

日常生活用具給付等事業制度のご利用につきましては、お住まいの自治体の福祉課窓口へお問い合わせください。

開発・製造元：Freedom Scientific

輸入・販売元：有限会社エクストラ

サファイア特約代理店：株式会社インサイト

株式会社 インサイト

〒981-3212

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1

TEL022-342-6801 FAX022-342-6802

<http://www.s-insight.jp>

サファイアを使って書く、サファイアをテレビに接続する

記入用スタンドを立ててサファイアを使用すると、カメラの下にスペースができ、ペンや鉛筆の先を拡大して確認しながら文字を書くことができます。メモをとったり、重要な電話のメッセージや電話番号を書きとめたり、書類に書き込んだりする際に便利です。

また、サファイアをテレビに接続することで、さらに拡大率を上げることができます。21インチのテレビに接続した場合、48倍まで拡大することが可能です。



様々な場面での活用

サファイアは市販薬や加工食品を購入するといった場面でも活用できます。店頭で、サファイアの画面を回転させてカメラを上に向け、商品の箱、缶、ビンなどをカメラにかざせば、商品に書かれた成分、注意書き、内容物、値段などの細かい文字を拡大することができます。また、静止画撮影機能により、ボタン一つで静止画像を撮ることができるので、陳列棚から商品を手に取らなくても、商品の情報を読むことができます。

使い方は簡単！

サファイアは多機能な上に操作が簡単です。操作は、電源ボタンを押して読みたい物の上に置き、手元のスライダーで倍率を調整するだけです。またボタンひとつで文字と背景の色の組み合わせを自由に変えることができます。使用後は、蓋を閉じれば自動的に電源が切れ、付属のケースに入れたり、鞆や机の引き出しにしまったりすることができます。



文字と背景の色の組み合わせの例



商品仕様＊

拡大率	3.4倍～16倍
カメラ	文字色・背景色の組み合わせ23種類
電池	充電式リチウムイオン電池 充電時間：4時間 連続使用時間：4時間 充電器は付属

画面	7インチ（17.8cm） 縦横比 16：9
----	--------------------------

サイズ	4.6×13.7×20.3 cm
-----	------------------

重さ	879 g キャリーケース付き
----	--------------------

＊商品の仕様は変更になることがあります。

価格 198,000円(非課税)

お問い合わせ・ご用命は、下記の販売店へどうぞ

メガネ
ロービジョン **アサワ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

RUBY™ 
Handheld Video Magnifier

ルビー
手のひらサイズの拡大読書器



ルビーの特徴

- 4.3 インチの高性能液晶ディスプレイ
- 218 グラムの軽い本体
- 5 種類の文字と背景の色設定が可能
- 静止画撮影機能。最大 15 枚の静止画の保存も可能
- 折りたたみ式の持ち手
- 2 時間連続使用可能

本体 2 年保証

**特典：便利な専用筆記スタンドを
ご購入の方全員にプレゼント！**



日常生活用具給付等事業制度のご利用
につきましては、お住まいの自治体の
福祉課窓口へお問い合わせください。

開発・製造元：Freedom Scientific
輸入・販売元：有限会社エクストラ
ルビー特約代理店：株式会社インサイト

持ち運び便利な携帯拡大読書器

ルビーは手のひらサイズの携帯拡大読書器です。

折りたたみ式の持ち手があり、ポケットや鞆に入れて外出先のあらゆるシーンで活用できます。

読みたいものの上に平らに置くだけで拡大画像が映し出されます。

また、持ち手を伸ばせば従来の拡大鏡のようなかたちでご使用いただくことができます。

鮮明な拡大

4.3 インチの高性能フルカラーディスプレイを有し、画面が大きくて見やすいのが特徴です。

低倍率で表示しても鮮明な画像が保たれます。

また、持ち手を伸ばして使用した場合、対象物との距離が離れた状態でもピントが合い、歪みのないハイコントラストで対象物を見ることができます。

何かを書き込みながらご使用になるのに非常に便利です。

簡単な操作で多彩な機能

ルビーの操作は簡単です。

電源ボタンを押して読みたい物の上に置き、拡大ボタンでお好みの倍率に調整するだけです。

文字と背景の色も、フルカラーの他、4種類の色設定から見やすいものをボタンひとつで選択できます。

静止画撮影機能により、対象物を至近距離で撮影し、手元に近づけて画像を確認することもできます。

静止画は最大 15 枚保存することができます。静止画像の状態では拡大率を変更することも可能です。

！保存した静止画は拡大して見るための画像です。データを他の情報媒体にコピーしたり印刷したりすることはできません。



商品仕様 *

拡大率

2 倍～ 14 倍（持ち手を持った場合）
5 倍、7.5 倍、10 倍（平面に置いた場合）

カメラ

フルカラー
白背景・黒文字
黒背景・白文字
青背景・黄文字
黒背景・黄文字

電池

充電式乾電池（単 4×4 本）
充電時間：2 時間
連続使用時間：2 時間

画面

4.3 インチ（102mm）縦横比 16 : 9

サイズ

125×75×34 mm
（持ち手を伸ばした状態の厚さ：16.5 mm）

重さ

218g

* 商品の仕様は変更になることがあります。

キャリーケース、AC アダプター付き

価格 99,000円(非課税)

お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ

株式会社 インサイト

〒981-3212

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1

TEL022-342-6801 FAX022-342-6802

<http://www.s-insight.jp>



160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251



RUBY® HD 4.3 inch



High Definition Handheld Video Magnifier

ルビー® HD 4.3 インチ

手のひらサイズの高画質拡大読書器

ルビー HD 4.3 インチは、持ち運びや携帯に便利な、手のひらサイズの高画質の拡大読書器です。いつでもどこでも、HD 対応の高解像度カメラにより、くっきり鮮やかな画像や文字の表示ができます。



3 年保障 +2 年間のサブ保障

お買い上げ後、3 年間は無償にて修理をいたします。
 無料修理規定に基づきます。誤使用、落下、冠水等による故障、天災、
 落雷などによる事故及び損傷は対象外です。
 3 年目以降の 2 年間は無償修理は 1 回のみとさせていただきます。

日常生活用具給付等事業制度の
 ご利用につきましては、お住まいの自治体の
 福祉課窓口へお問い合わせください。

開発・製造元：Freedom Scientific
 輸入・販売元：有限会社エクストラ
 ルビー特約代理店：株式会社インサイト

手のひらサイズの高画質拡大読書器

● 持ち運びや携帯に便利な高画質な拡大読書器

4.3 インチのカラーディスプレイに鮮明でくっきりとした画像を表示します。

本、写真、新聞、ラベルなどを最大 13 倍まで拡大できます。どの拡大率でも高画質です。

20 種の色設定から見やすい設定で文字を見ることができます。

● 簡単に 使いやすい設計

色とマークで識別しやすく作られたボタンを使って操作します。拡大率の変更や色の設定、ライン、マスク機能を使用できます。

● いろいろ使える専用スタンド



専用スタンドを使えば、手元を拡大して筆記することができます。持ち手を伸ばしたまま置けるので、安定した拡大鏡のようにも使えます。

● 折りたたみ式の持ち手



折りたたみ式の持ち手は、缶やボトルの表示を見たり棚のものを見たりする時に便利です。

静止画撮影機能で、静止画にしてから自分に近づけてみることができます。

商品仕様 *

- カメラ** オートフォーカス、高解像度カラーカメラ 500 万画素
- 拡大率** 2 倍～13 倍 ※なめらかな拡大率調整機能
- 色設定** 基本設定 5 種類（フルカラー／白背景・黒文字／黒背景・白文字／青背景・黄文字／黒背景・黄文字）のほか拡張設定 15 種類
- 静止画メモリー** 80 画像 ※保存した画像は、USB ケーブルを接続してコンピュータへ転送できます。
- モニタ** 4.3 インチワイドスクリーン 液晶ディスプレイ 縦横比 16：9
- サイズ** 幅：125 mm 奥行：74mm 厚さ：36 mm
- 重さ** 227g
- バッテリー** 充電式乾電池（単 4×4 本） 充電時間：2 時間 連続使用時間：2 時間
- 付属品** スタンド、キャリーケース、充電器、ハンドストラップ、USB ケーブル

* 商品の仕様は予告なしに変更になることがあります。

価格 167,400円（非課税）

お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ

株式会社インサイト

〒981-3212

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘 3-28-1

TEL022-342-6801 FAX022-342-6802

<http://www.s-insight.jp>

メガネ
ロービジョン

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

キャンディ4 HD

電子ルーペ



HDカメラ搭載
で高画質
進化したデザインで、
使いやすい機能・形状

希望小売価格 74,500円 (非課税)



見やすい

オートフォーカスHDカメラは、4.3インチワイド液晶の高細密な見やすい画像です。対象物から離してもピントが合うので見たいものにかざして使用するのに便利です。



読みやすい

ハンドルを用いることで、ルーペの様に使うことができます。また、専用設計のスタンドに置くことで、持たずに快適に読むこともできます。



使いやすい



わかりやすいボタンで簡単に操作できます。静止画は5枚まで保存できます。また、画面には大きな時計を表示がすることができます。

倍率(スタンド使用時)	約1倍～約20倍(約2倍～約8倍)
バッテリー(Li-Ion)	約2.5時間充電 / 約2～2.5時間連続使用
カラーモード	カラー・白黒反転・白黒・黒黄・青黄(カラー以外は設定で変更可)
外形寸法・重量	136mm x 81mm x 38mm(グリップを畳んだとき)・約240g
製造元(生産)・保証期間	HIMS(韓国)・2年間(要ユーザー登録)

輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL: 0797-74-2206 FAX: 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail: info@times.ne.jp

■お問い合わせ

メガネ
ロービジョン **アサカ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

Eye-C (アイシー)

手ごろな価格で高画質



4.3インチの大きな画面 でかんたん操作

希望小売価格 39,800円 (非課税)

電子ルーペ



地図を見る

電子ルーペEye-Cを使えば、旅の行程を地図でたどって楽しむこともできます。

文字が消えにくく読みやすい

映像処理速度が速く、本体を動かして読み進んでも文字が消えにくく、ぼやけにくいのでスムーズな読書が可能です。

筆記用スタンド内蔵で書きやすい

本体の裏側に収納されているスタンドを立てれば、ペンをカメラ部の下に差し込んで文字の筆記が可能です。

倍率(スタンド使用時)	5段階: 約4・5・7.5・11・15倍 (約2.7・3.3・4.9・6.7・10倍)
バッテリー (Li-Ion)	4～6時間充電 / 4～5時間連続使用
カラーモード	カラー、白黒、白黒反転、黒黄、青黄、黄青、白青
外形寸法・重量・保証期間	15.2 x 8.1 x 2.8cm ・ 230g ・ 2年間(要ユーザー登録)
製造元(生産)	Aumed (中国)

輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL: 0797-74-2206 FAX: 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail: info@times.ne.jp

■お問い合わせ



160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

コンパクトミニ

こんなに大きくハッキリ！




小型・軽量・コンパクト！
ルーペ何本分ものの威力！
読みたいものにかざして
使えます

希望小売価格 34,800円（非課税）

電子ルーペ コンパクトミニ

電子ルーペ

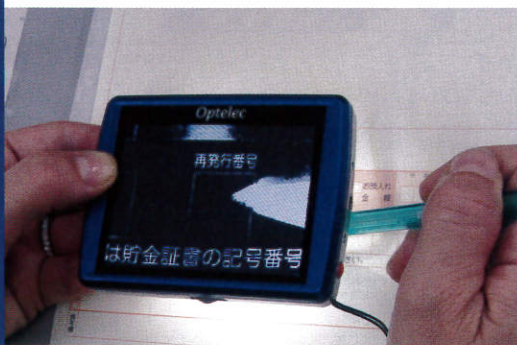

小型・軽量・コンパクト

3.5インチ画面で重さわずか134g
ポケットサイズで持ち運びも自由

外出先での筆記に便利

郵便局や銀行、病院などの用紙にも
文字を記入することができます

ショッピングが楽しくなる

コンパクトミニがあれば商品の値札や
素材、生産国などの情報を自分で
確認できます

倍率（スタンド使用時）	約2倍～11倍（3段階：約3・8・11倍）
バッテリー（Li-Ion）	約3.5時間充電 / 約3.5時間連続使用
カラーモード	カラー、白黒、白黒反転、黒黄、青黄
外形寸法・重量・保証期間	9.0 x 7.0 x 1.7cm ・ 134g ・ 2年間（要ユーザー登録）
製造元（生産）	Optelec オランダ（台湾）

輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL : 0797-74-2206 FAX : 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail : info@times.ne.jp

■お問い合わせ



160-0004 新宿区四谷1-8

03-3357-2251

ビズム イーケア 3.5

手ごろな価格で高画質



小型、軽量、コンパクト
くっきり見やすい
かんたん操作

希望小売価格 34,800円 (非課税)



読みやすい

明るく見やすい3.5インチ液晶
折りたたみ式スタンドを使って楽
な姿勢で読めます

持ち運びが楽

重さわずか140g・小型・軽量・
コンパクト、筆記もできます

使いやすい

わかりやすいボタンで簡単操作
テレビ接続用ビデオ出力端子・
ケーブル付です

倍率 (スタンド使用時)	約2.5倍～約17倍 (4段階: 約 3.6・7・11・14倍)
バッテリー (Li-Pol)	約3.5時間充電 / 約4時間連続使用
カラーモード	カラー、グレー、白黒、白黒反転、青白、黄黒、黄青、青黄
外形寸法・重量・保証期間	11.8 x 7.4 x 1.9cm ・ 140g ・ 2年間 (要ユーザー登録)
製造元 (生産)	Beijing Outsmarting Dacone (中国)

輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL : 0797-74-2206 FAX : 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail : info@times.ne.jp

■お問い合わせ



160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

拡大読書器

日常生活用具として
給付実績があります

ZooMax Snow 7HD

ズーマックス スノー 7HD

安心アフター サービス

5年間品質・ 修理保証サービス

5年間の品質・修理規定にもと
づく無償修理サービスを保証し
ます。

※落下、水濡れ、誤使用、火災、
天災などによる故障や付属品、送
料は保証の対象ではありません。

バッテリー無償交換 サービス

5年間の保証期間内に、送料
送り主負担にて内蔵バッテリーを
1回無償交換いたします。

有償修理費上限 サービス

保証対象外の高額な部品交換
や技術料を伴う有償修理の場
合、本体修理費8,500円(税
別)、付属品修理費5,000円(税
別)を上限とします。


期間:ご購入から5年間

回数:高額修理の1回目限り

※送料、取次店様のサービス料は
別途必要です。

※修理費が本体価格の50%を超
える場合は、本サービスの適用対
象外です。

※バッテリーなどの消耗品交換は、
本サービスの適用対象外です。

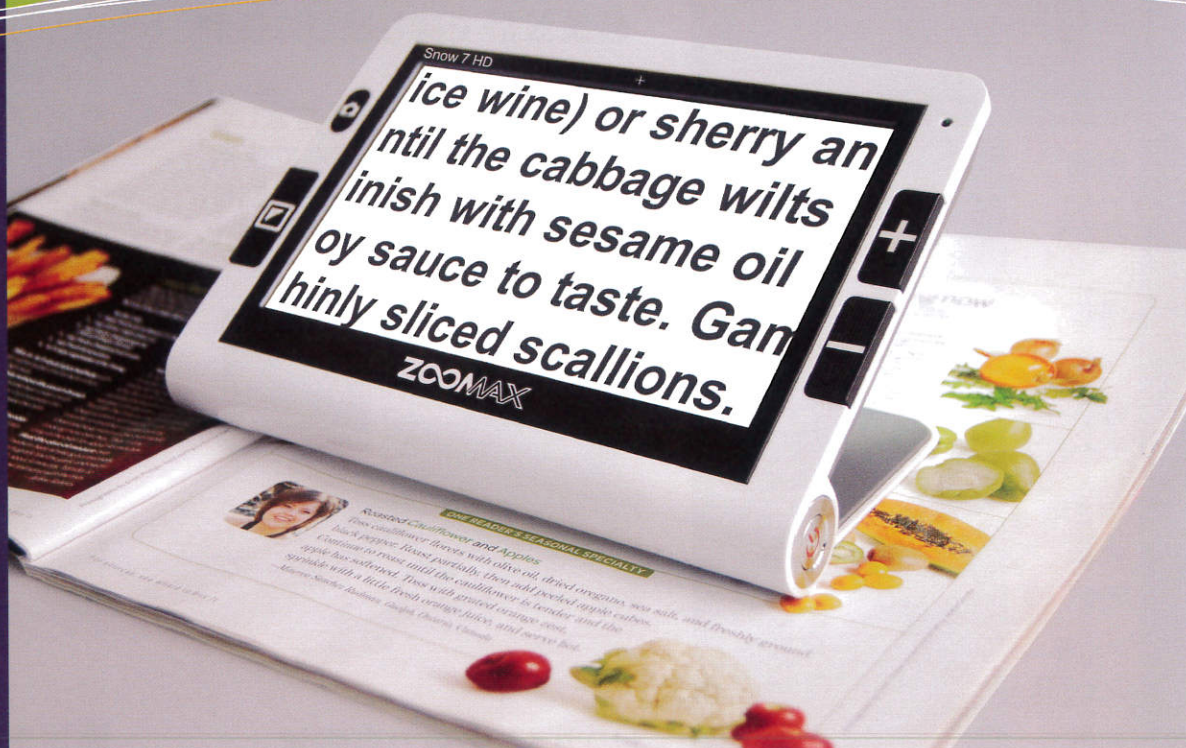

軽量設計！

7インチの大画面なのに 500g以下

分かりやすい操作！

読書も筆記も望遠も簡単

TMES

Power Support & Challenge

希望小売価格 198,000円(非課税)

スノー 7HD のココが便利!

仕様

画面	7インチTFT液晶モニタ 幅152mm×高さ89mm
カメラ	約500万画素
倍率	約2.2～約19倍(近用モード時。遠用モード時は距離に応じて低下)
カラーモード	カラー・白黒・白黒反転・他9種類
明るさ調整	6段階
照明	LED(点灯/消灯可)
インターフェイス	HDMI出力端子(テレビやモニターにより、映像が映らない場合があります)
電源	ACアダプタ(5V/2.5A)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 充電時間: 4～5時間 連続使用時間: 3～5時間 (画面の明るさの設定により変わります)
外形寸法	幅195mm×高さ139mm ×厚さ25mm
重さ	約490g
付属品	ACアダプタ・ソフトケース・HDMIケーブル・クリーニングクロス・取扱説明書・製品保証書

生産国: 中国
※商品の仕様、価格は予告無く変更する場合があります

軽量設計で持ち運びに便利

7インチの大画面液晶を搭載しながら、500g以下。持ち運んで使用するのに便利です。屋内での読書から、外出先での筆記まで、この1台で行うことができます。



分かりやすい操作性

ボタンの色が分かりやすく、かつ数が少ないため、操作が簡単です。また、スタンドを立てることで、読書だけでなく、筆記も容易です。



HDカメラ搭載で高画質

約500万画素の高画素カメラを搭載し、きめ細かい画像が表示できます。7インチの大画面との組み合わせで、低い倍率で広い範囲をご覧になりたい方から、高い倍率で大きく表示させたい方まで、様々な状況で使用頂けます。



遠用モードを搭載

スタンドを閉じた状態でカメラを遠用モードに切り替えると、約5m先まで焦点が合います。本体を置いて見ることで見えないものや、広い範囲を映したい時に便利です。



輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL: 0797-74-2206 FAX: 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail: info@times.ne.jp

製造元: ZooMax Technology Inc

■お問い合わせ

メガネ
ロービジョン **アサワ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

拡大読書器

Compact 5HD

日常生活用具として
給付実績があります

コンパクト 5HD

安心アフター サービス

5年間品質・ 修理保証サービス

5年間の品質・修理規定にもと
づく無償修理サービスを保証し
ます。

※落下、水濡れ、誤使用、火災、
天災などによる故障や付属品、送
料は保証の対象ではありません。

バッテリー無償交換 サービス

5年間の保証期間内に、送料
送り主負担にて内蔵バッテリーを
1回無償交換いたします。機種
によってはご購入時に予備
バッテリーを付属します。

有償修理費上限 サービス

保証対象外の高額な部品交換
や技術料を伴う有償修理の場
合、本体修理費8,500円(税
別)、付属品修理費5,000円(税
別)を上限とします。
期間:ご購入から5年間
回数:高額修理の1回目限り

※送料、取次店様のサービス料は
別途必要です。
※修理費が本体価格の50%を超
える場合は、本サービスの適用対
象外です。
※バッテリーなどの消耗品交換は、
本サービスの適用対象外です。



読みやすさと
使いやすさを追求した
800万画素高精細度カメラ
搭載の携帯型拡大読書器

コンパクト 5HD のココが便利!

仕様

画面	5インチTFT液晶モニター 幅109mm × 高さ65mm
カメラ	約800万画素
倍率	約1.5～約18倍(読書モード時。カメラモード時は距離に応じて低下)
カラーモード	カラー・白黒・白黒反転・黒黄・青黄(カラー以外はメニューで16種類より選択可能)
明るさ調整	5段階
照明	LED(点灯/消灯可)
インターフェイス	なし
電源	ACアダプタ(5V/2A)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 充電時間:約 3.5時間 連続使用時間:約2～3時間(画面の明るさ、モード、被写体により変わります)
外形寸法	幅137mm × 高さ88mm × 厚さ25mm
重さ	約320g
付属品	キャリングケース・ストラップ・ACアダプタ、クリーニングクロス・取扱説明書、製品保証書

企画設計:オランダ / 製造:台湾

※商品の仕様、価格は予告無く変更する場合があります


画面を斜めにせり上げて “卓上ポジション”

モニタをスライドさせ、斜めにせり上げた“卓上ポジション”は、見たいものの上に置いたときに、楽な姿勢で見ることができる設計です。同時に筆記も容易です。



800万画素高精細度カメラで、鮮明な広角画面を実現

コンパクト5HDは、すべての倍率で高画質です。卓上ポジションで、最低倍率1.5倍を実現。低倍率で、広い範囲を見たいというニーズにもお応えします。

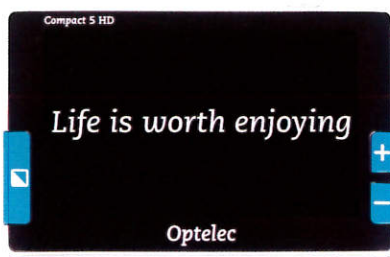

閉じたままで “手持ちポジション”

モニタを閉じたままの“手持ちポジション”は、ルーペのようにかざして離れたものをみることが可能です。時刻表や値札を見るときに便利です。



フルタイムオートフォーカス 無段階ズーム1.5倍～18倍

卓上ポジションでは、低倍率約1.5倍から高倍率約18倍まで無段階に調節できます。手持ちポジションでは、約1.2m先までオートフォーカスで焦点が合います。



輸入・販売元

SystemGear

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL: 0797-74-2206 FAX: 0797-73-8894

http://www.times.ne.jp E-mail: info@times.ne.jp

製造元: Optelec

■お問い合わせ

メ ガ ネ ロービジョン **アサワ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

携帯型拡大読書器

ルッキープラス

Looky Plus



小さい！ 軽い！ 書きやすい！

希望小売価格：本体 **69,000円** (非課税)：交換バッテリーセット **89,000円** (非課税)

2年または5年保証 (ユーザー登録を行った場合)

※ 本体のみご購入は2年間の修理保証です。

※ 交換バッテリーセットは5年間の修理保証と充電機、充電器が付属するセットです

- 応答速度が速く、高画質
- 使いやすい折りたたみ式の持ち手
- 新型カメラで文字が流れにくい
- LEDランプ搭載で暗くてもよく見える
- 画像静止機能搭載



書類や写真、商品タグなども見やすく拡大 読み書きに便利！

速い応答性

文字も記入できます



- 速い応答速度で、読み進んでも文字が消えにくくよりスムーズな読書が可能になりました



- 持ち手は用途に応じて5段階に角度調節できます角度を調節することでペン先をカメラ部の下にいれることができ、文字の記入ができます

小型・軽量、専用ケースで持ち運びも便利

簡単操作



- 付属の専用ケース、専用ストラップは持ち運びに便利です本体の重さ約200g、電池は充電式です充電電池は市販のものも使用可能です



- ボタンが少なく操作が簡単です持ち手は手になじみ、持ちやすい構造ですカメラが中央にあるため、ズレのない自然な映像です

仕様

液晶画面	3.5インチ TFT-LCD
倍率	2倍～20倍(4段階ズーム搭載) 対象物への距離により倍率が変わります
照明	LED2個
カラーモード	カラー、白黒、白黒反転、青黄、黒黄
推奨充電電池	単3型ニッケル水素電池 2個 1.2V、2300mah (市販充電電池使用可) ※推奨充電電池以外はお使用にならないで下さい
充電・使用時間	約5時間充電 約2時間連続使用
サイズ	縦75mm 横113mm 厚さ38mm (もち手収納時)
重さ	200g

お問合せは



製造元:Rehan Electronics Ltd.

輸入販売元:株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL:0797-74-2206 FAX:0797-73-8894

月～金 9:00～17:30 (土日祝日は除く)

E-mail: info@times.ne.jp

URL: http://www.times.ne.jp




160-0004 新宿区四谷1-8

03-3357-2251

商品の仕様、価格は予告無く変更することがあります。

アメリカ・ヨーロッパで大ヒット

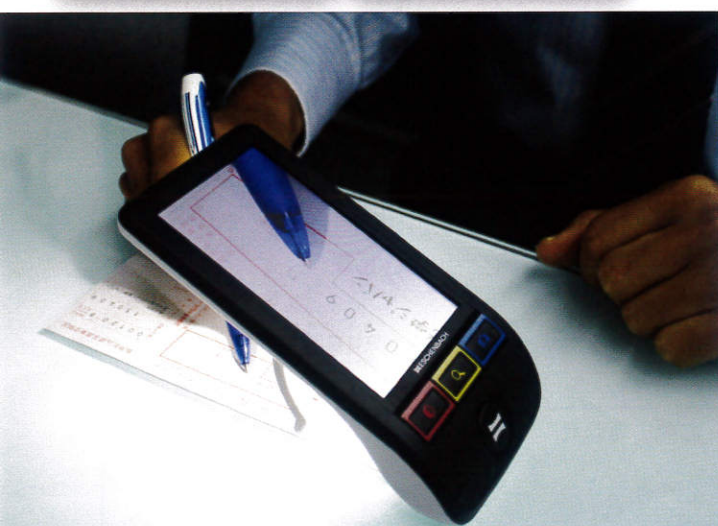


洗練されたドイツ・デザイン
誰でもカンタン操作
安心の5年保証

¥ 194,400 (税込価格)

書き込み時の画面が見やすくスペースが広くとれます



大きくて
見やすいボタン

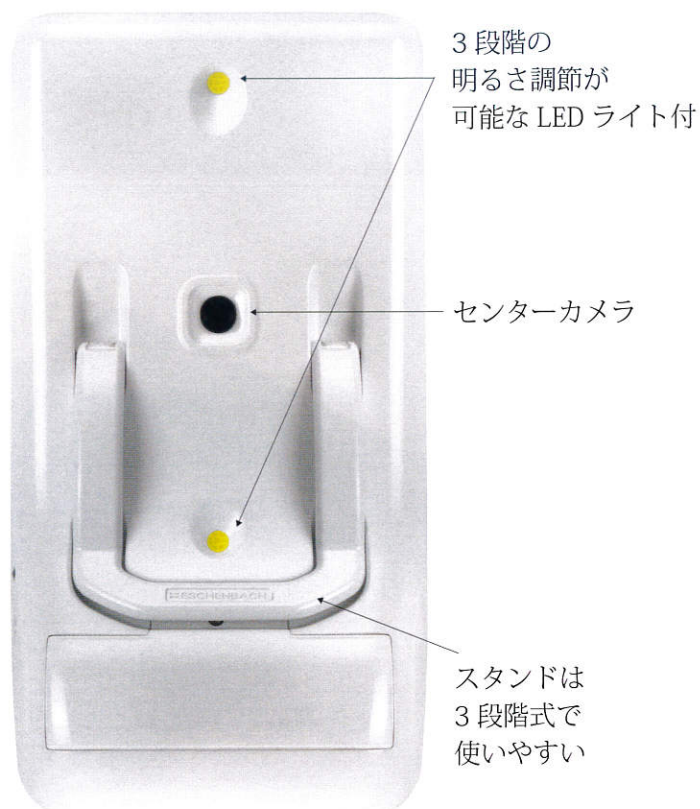

3段階の
明るさ調節が
可能なLEDライト付

センターカメラ

スタンドは
3段階式で
使いやすい

スマートなデザインで美しいフォルム

書きやすさ、見やすさを追求しデザインにもこだわった携帯型拡大読書器

人前で使うからこそスマートに簡単に使いこなしたい。創業以来 100 年以上ロービジョンと関わってきたエッセンバッハは、洗練されたデザインと品質であなたのビジョンライフを応援します。

- 使いやすい大きさの 5 インチ液晶モニター。
- 倍率は使用状況によって 1.7 ～ 12 倍まで対応。
- 大きくわかりやすい 3 種類のボタンを押すだけのカンタン操作。
- カメラが中心についているので拡大像に違和感がありません。
- 簡単に引き出せるスタンド使用で書き込みや作業も楽にできます。
- カラー、白黒反転など 5 種類のモードで見やすい設定に切り替えられます。
- シャッターボタンで詳しく見たいものを固定できます。20 枚保存可能。

スペック

画面：5 インチ液晶モニター
倍率：1.7 倍～ 12 倍
モード切替え：カラー、白黒反転など 5 種類
明るさ調整：3 段階
充電時間：約 2 時間
連続使用時間：約 3 時間
サイズ：174×90×40mm
重さ：約 220 g
付属：ハードケース、AC アダプター
価格 ￥194,400（税込価格）

安心
保証

5 年間保証サービス

5 年間無償修理サービスを保証します

バッテリー無償交換サービス

5 年間の保証期間内に内蔵バッテリーを 1 回無償交換いたします

※上記のサービスはいずれも弊社保証規定に基づきます。

お問い合わせ

メガネ
ロービジョン **アサワ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251

※商品は予告なしに製造中止、仕様・価格変更される場合がございます。

ESCHENBACH

黒板以外にも、
よく見えるものがありました。

◇ 2002年度グッドデザイン賞受賞

携帯オートフォーカス拡大鏡 アイファイン

eye  FINE 詳しくはこちらをご覧ください ●ホームページ… <http://eyefine.jp>

オートフォーカス拡大鏡 アイファイン

◇ 2002年度グッドデザイン賞受賞

近くの文字が
4.7倍

遠くの文字が
3.5倍

国内線
International
국제선
國際線

障害者

高齢、障害者に効果

笑顔増えた「手が動くように」


心身癒やす「園芸療法」

南九州

北

【 特 長 】

- ◎ 遠くから近くまで、自動で焦点を合わせて拡大します。
- ◎ 初期設定後の操作は、電源ON、OFFと簡単です。
- ◎ メガネタイプなので、両手が自由に使えます。

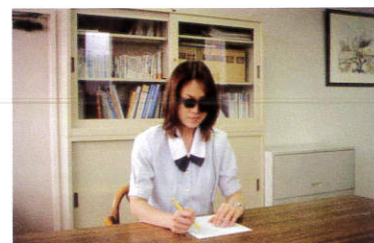

アイファイン 標準セット



※本製品に消費税は含まれておりません。(日本特許出願中・日本意匠登録出願中)

◆◆◆ アイファイン仕様 ◆◆◆

◎タイプ	ケプラー式
◎使用範囲	30cm～無限大
◎視野角	16.4度
◎倍率	遠方3.5倍 近方4.7倍
◎視度調整範囲	+7.0D～-10.0D (オーダー +15.0D～-2.0D +5.0D～-12.0D)
◎連続使用時間	約8時間
◎重量	100g (フード込み130g)

注) 外観・仕様・価格については予告なしに変更することがあります。
注) カタログに掲載の社名及び製品名は登録商標です。

発売元 株式会社ケイメイ ロービジョン事業部
〒880-0021 宮崎市清水3-6-10 MMKビル3F
TEL.0985-83-2810 FAX.0985-83-2812

製造元 日東光学株式会社

取 扱 店

メガネ
ロービジョン
アサカ

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251



拡大読書器


ビジョ

ブック

Visio Book



拡大読書器のニュースタイル 折いたたんで持ち運ぶ！

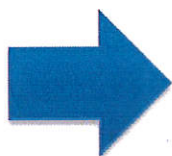

- 高性能HDカメラ採用
- 5時間連続使用可能
- 7種類の文字と背景の色設定が可能
- 12.5インチ高画質液晶モニター搭載
- カメラの向きを180度回転可能
- モニタの高さと角度を見やすい位置に調節可能

安心の 1年間保証

本体

360,000 円(非課税)



ケージーエス株式会社
KGS CORPORATION

www.kgs-jpn.co.jp



拡大読書機Visio Bookは
BAUM社(ドイツ)製です。

※モニター表示画像は合成画像です。

拡大読書器 **Visio Book**

名称	Visio Book (ビジオブック)
寸法	折り畳み時：335 (W) × 305 (D) × 54 (H) mm 通常使用時：335 (W) × 305 (D) × 481 (H) mm
重量	約 3.7 kg
液晶モニター	12.5インチ ワイド液晶モニター
連続稼働時間	約 5時間半
充電時間	約 3時間半
画面モード	カラー、白黒、黄黒、青黒、緑黒、紫黒、白青、黄青 ※カラー以外各反転可能
ズーム	1.9～30倍
電源	DC 19V (ACアダプタより入力)
オートフォーカス	可能
付属品	ACアダプター、電源コード、専用ケース、クリーニングクロス



飛行機の中でも！



折りたたんでしまえる！



カメラを手前に向けると鏡のようにも



カメラ向きを変えれば遠くの物を映すことも

販売・輸入元


ケージーエス株式会社
KGS CORPORATION

〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1004
 TEL 0493-72-7311 Fax 0493-72-7337
 e-mail : info@kgs-jpn.co.jp
 URL : www.kgs-jpn.co.jp

製造元 BAUM 社(ドイツ)

お問い合わせ・ご用命はKGSまたは、下記販売店へどうぞ

メガネ ロービジョン **アサハラ**

160-0004 新宿区四谷1-8
03-3357-2251